



**TECHARTMED®**

**NINGBO TECHART MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD**

Add: No.99 South Hongliang Road Ningbo China 315033

Tel: +86-574-83076915

Fax: +86-574-87137656

E-mail:sales02@techartmed.com

Web: www.techartmed.com

Notre Fournisseur Idéal De  
Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde  
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale



**TECHARTMED**

Notre Fournisseur Idéal  
De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde  
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

**ET800**

Table D'opération Electro-hydraulique



## 02 TECHARTMED

### Votre Fournisseur Idéal De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde  
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

Soins centrés sur le patient et convivialité avec client sont comme principes fondamentaux de développement pour nous, Techartmed est devenu l'un des principaux fabricants en Chine. Une coopération étroite avec l'hôpital et des années d'expérience ont permis de tester nos tables dans le marché et les améliorer.

Conçu pour des opérations chirurgicales de plus en plus complexes, ET800 a une capacité de charge extrême dans n'importe quelle position. La structure modulaire lui permet d'être adapté à patient de grande et en même temps il peut être équipé pour tous les types d'opération chirurgicale. Une translation longitudinale jusqu'à 310mm rend l'ET800 encore plus polyvalent.



# TECHARTMED

Votre Fournisseur Idéal  
De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde  
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale



## Détails 04

- 1 / Translation longitudinale jusqu'à 310mm pour un accès librement au C-Arm sans repositionnement du patient.
- 2 / Capacité de charge extrême de 350 kg avec une sécurité et une stabilité élevées.
- 3 / Table de conception modulaire adaptée aux besoins des opérations chirurgicales.
- 4 / Le point de montage 'Easy click' permet au plateau de s'adapter à une grande variété de chirurgie et à la taille des patients.
- 5 / Coussin de mémoire avec une conception antistatique et imperméable à l'eau.
- 6 / Le contrôle du télécommande standard rend le contrôle plus sécurisé.
- 7 / Hauteurs maximales et minimales de l'ET800, pour un fonctionnement confortable, assis et debout.



### Conception modulaire

La structure modulaire du plateau est adaptée aux différents besoins des opérations chirurgicales, qui peut également réduire la dépense de l'hôpital.

### Conception de connexion 'Easy Click'

La conception de la connexion à 'Easy Click' permet une solution de montage modulaire pratique, sécurisée et intuitive. Différentes chirurgies ont différentes exigences de table. La connexion de 'Easy Click' rend la table facile à adapter aux chirurgies.



Tête en 2 arculations

Plaque d'extension avec 'Easy Click' pour rajoutement de modules

Billot intégré manuel

Translation longitudinale motorisée pour C-Arm

Jambière électrique et manuel avec 'Easy Click'

Plaques de jambe courtes motorisées pour un ajustement individuel ou synchrone

### Système de Double Contrôle

La table est contrôlée à l'aide d'une télécommande, en cas d'urgence, elle peut également être utilisée à l'aide du panneau de commande sur le pilier.

Toutes les fonctions essentielles de la table d'opération peuvent être contrôlées par la télécommande et panneau de commande fixée (par exemple Flex, Reflex, position 0 ou verrouillage de roulettes). L'élévation du billot est contrôlée par une manivelle.

# TECHARTMED

Votre Fournisseur Idéal  
De Table D'opération

Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde  
Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale



Hauteur minimum de plateau: 550mm



Hauteur maximum de plateau: 1050mm

## Position Extrême Haute Extrême Basse

La hauteurs maximum et minimum de l'ET800, non seulement adaptées aux opérations de chirurgie, aussi pour le travail confortable des médecins, à la fois assis et debout.

 **TECHARTMED®**



## Position de Patient Flexible

ET800 est une table d'opération multifonctionnelle qui répond à diverses exigences, telles que la chirurgie thoracique, rénale, chochiste, endoscopique, gynécologique, ORL, etc.

# 08

Cousins de positionnement jambières  
bottes pour position de lithotomie et  
cuvette optionnelles



Chirurgie générale



Position décubitus latéral pour  
la chirurgie rénale et biliaire



Position des opérations ORL



Position des opérations thoraciques et viscéraux



Appui-bras latéral optionnel



Position genu-pectorale

Modèle	Site	Largeur	Longueur	Hauteur Minimum	Course d'élévation
ET800		≥2100mm	≥550mm	≤550mm	≥500mm

NB 01: la largeur de plateau n'a pas compris les rails latéraux  
 NB 02: la hauteur minimum n'a pas compris le coussin et doublage des plateaux

**PARAMÈTRE** ET800 Table d'opération électro-hydraulique

Mouvements		Modèle: ET800
Trendelenburg de Plateau	Procline	≥35°
	Décline	≥35°
Inclinaison Latérale (Droit et Gauche)		≥25°
Têtière	Élévation	≥40°
	Abaissement	≥90°
	Flexible	≥40°
Dossier	Élévation	≥80°
	Abaissement	≥45°
Jambières	Élévation motorisée	≥80°
	Abaissement motorisée	≥90°
	Élévation manuelle	≥90°
	Ecartement	≥90°
Elevation de Billot		120 mm
Translation Longitudinale		310 mm
Flex		≥225°
Reflex		≤100°



**Configuration de Table**

Télécommande	Standard	Position mémoire configurable	Standard	Extension modulaire	Standard (1 pièce) De plus optionnel
Panneau de commande	Standard	Position extrême haute et basse	Standard	Jambière motorisée monobloc	Optionnelle
Télécommande LCD sans fil	Optionnelle	Billot intégré	Standard	Jambières motorisées divisées (contrôle indépendant)	Standard

## TECHARTMED

Votre Fournisseur idéal  
 De Table D'opération  
 Bien Vendu Pendant 40 Ans Dans Le Monde  
 Répondre aux exigences fondamentales de la chirurgie générale

Translation longitudinale: 310mm

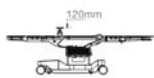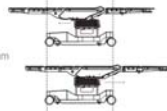

Élévation de billot: 120mm



Hauteur minimum de plateau: 550mm




Hauteur minimum de plateau: 1050



Flexion de Têtière


Élévation de têtère

Abaissement de têtère

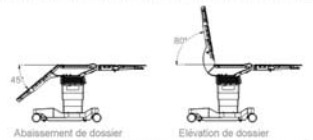


Abaissement de dossier

Élévation de dossier

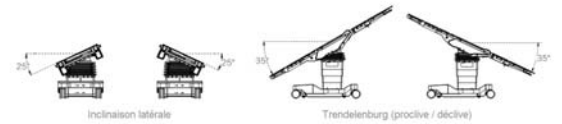


Inclinaison latérale

Trendelenburg (procline / décline)

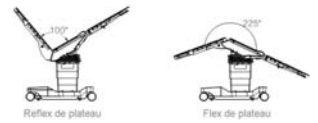

Reflex de plateau

Flex de plateau

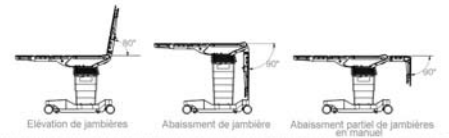

Élévation de jambières

Abaissement de jambière

Abaissement partiel de jambières en manuel

Ecartement de jambières

